



# FILT'RAY® DataManager

## AVANTAGES FILT'RAY®

- Portail personnalisé avec accès sécurisé
- Identification et suivi des FILT'RAY associés aux points d'usage
- Enregistrement automatisé ou saisie manuelle des informations
- Alertes automatiques de remplacement des filtres par SMS ou e-mail


## DOMAINES D'APPLICATIONS

- Traçabilité sécurisée et personnalisée des FILT'RAY Douches et Robinets installés aux points d'usage





## La plateforme Internet FILT'RAY® DataManager

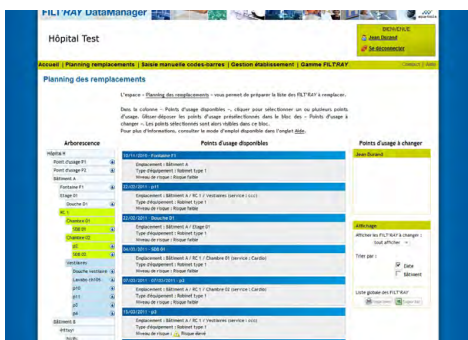

Aqua-tools propose la plateforme internet **FILT'RAY® DataManager** dédiée à la gestion des installations et aux remplacements des filtres terminaux **FILT'RAY®** dans les établissements de santé.

Elle est accessible sur internet par des codes d'accès personnalisés et sécurisés. Après l'enregistrement de tous les points d'usage de votre établissement équipés d'un

**FILT'RAY®**, le logiciel vous permet de programmer le remplacement des filtres. **FILT'RAY® DataManager** prévoit automatiquement les prochaines dates de changement des **FILT'RAY**. Le lecteur de code-barres **Datalogic™ Memor**, fourni par Aqua-tools, est programmé pour associer un filtre à un point d'usage identifié, grâce aux codes-barres 2D unitaires. Grâce à **FILT'RAY® DataManager**, des alertes sur le remplacement des **FILT'RAY** sont envoyées automatiquement par e-mail ou par SMS.

## Le lecteur de code-barres

- Ergonomique, compact et robuste
- Imageur 2D haute précision
- Prêt à l'emploi
- Résiste aux projections d'eau
- Classe de protection IP54
- Windows CE 5.0
- Écran couleur QVGA tactile et graphique



## LES FILT'RAY®

- + Plateforme de traçabilité dédiée à votre établissement
- + Traçabilité complète des remplacements de **FILT'RAY®**: lecture des codes-barres 2D unitaires présents sur chaque produit
- + Accès sécurisé
- + Espace personnalisé
- + Alertes automatiques de remplacement des filtres aux points d'usage
- + Étiquette à code-barres 2D amovible et repositionnable sur carnet sanitaire classique

aqua-tools and FILT'RAY sont des marques déposées d'aqua-tools.

## Références et commandes

Référence	Nom du produit	Unités	Contenu
AT030401	FILT'RAY Datamanager Complet	1	Licence d'utilisation de la plateforme de traçabilité FILT'RAY DataManager Codes d'identification sécurisés / Lecteur code-barres Datalogic
AT030402	Lecteur code-barres Datalogic	1	Lecteur code-barres programmé / Batterie standard Câble USB / Alimentation / Garantie 1 an
AT030503	FILT'RAY Datamanager prestation	1 jour	Configuration de la plateforme: création des points d'usage et de l'ensemble des comptes utilisateur, édition des étiquettes
AT030501	FILT'RAY Datamanager Complet - Location	1 mois	Licence d'utilisation de la plateforme de traçabilité FILT'RAY DataManager Codes d'identification sécurisés / Lecteur code-barres Datalogic
AT030502	Lecteur code-barres Datalogic - Location	1 mois	Lecteur code-barres programmé / Batterie standard Câble USB / Alimentation / Garantie 1 an

26, rue Charles-Édouard Jeanneret  
78300 Poissy – France  
Phone: +33 1 39 75 02 20  
Fax: +33 1 39 75 08 28  
contact@aqua-tools.com  
www.aqua-tools.com

